




STARMed CaStar R Up

Открываемый шлем для неинвазивной искусственной вентиляции легких (НИВЛ)

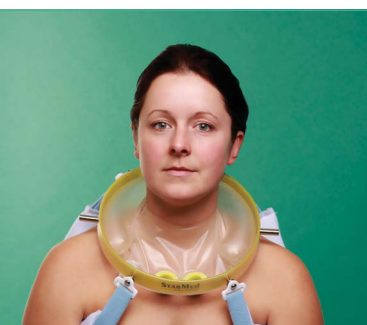

Реанимация ▪ Неинвазивная вентиляция ▪ **STARMed**



STARMed CaStar R Up открываемый шлем для НИВЛ

StarMed CaStar R Up

Открываемый CaStar R Up - комфортный, удобный и легкий интерфейс пациента для неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ), разработан в качестве альтернативы традиционным методам проведения НИВЛ. CaStar R Up хорошо переносится длительное время и может снизить риски, связанные с эндотрахеальной интубацией и применением лицевой маски. Его можно применять в положении на спине или полусидя, что обеспечивает идеальные условия для НИВЛ-терапии.


Преимущества

- Обеспечивает быстрый доступ к пациенту во время плановых и экстренных процедур
- Один человек может легко удалить верхнюю часть шлема и получить доступ к пациенту
- Датчики и катетеры остаются на своем месте, так как они присоединены через нижнюю часть шлема

Технические характеристики

- 22М соединители соответствуют стандарту ISO
- Встроенная надувная шейная манжета для дополнительного удобства пациента
- Комфортные и атравматичные подмышечные держатели
- По требованию доступны другие аксессуары
- Два герметичных порта доступа для датчиков и катетеров 3.5-7.0 мм в диаметре
- Порт доступа к пациенту с накручивающейся крышкой. Он снабжен двунаправленным клапаном безопасности, который автоматически открывается в случае падения давления
- Герметичность системы достигается за счет наличия эластичной мембраны в месте контакта с верхней частью тела, когда шлем находится в надутом состоянии

Читайте больше на www.intersurgical.ru

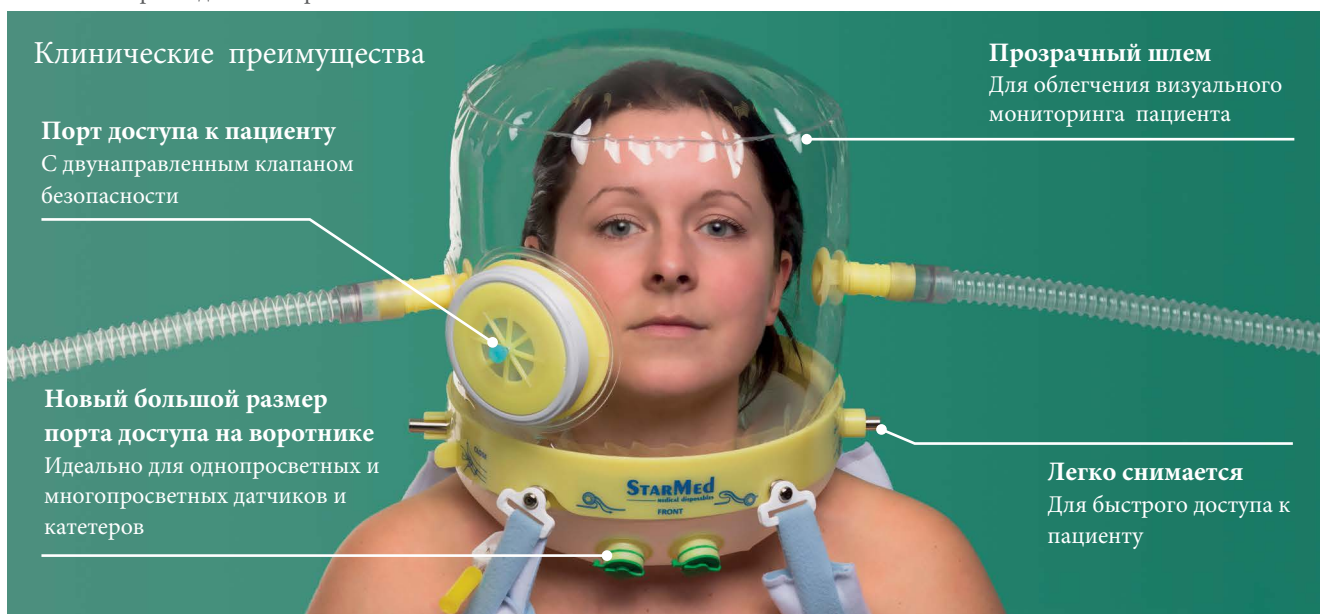

Клинические преимущества

Порт доступа к пациенту

С двунаправленным клапаном безопасности

Новый большой размер порта доступа на воротнике

Идеально для однопросветных и многопросветных датчиков и катетеров

Прозрачный шлем

Для облегчения визуального мониторинга пациента

Легко снимается

Для быстрого доступа к пациенту

CaStar R Up открываемый шлем для НИВЛ с надувной шейной манжетой, двунаправленным клапаном безопасности и портом доступа к пациенту

Упаковки для клиентов поставляются по специальному запросу

| Код | Размер | Окружность шеи | Кол-во в коробке |
|--------------|-----------------|----------------|------------------|
| CA022XXL/2RY | Экстра большой | ≥50см | 5 |
| CA022XL/2RY | Очень большой | 45-52см | 5 |
| CA022L/2RY | Большой | 40-47см | 5 |
| CA022M/2RY | Средний | 34-41см | 5 |
| CA022S/2RY | Малый | 27-34см | 5 |
| CA022XS/2RY | Очень маленький | 17-27см | 5 |



www.intersurgical.com/info/starmed

IS1.39_ROW • Issue 3 03.16



UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy
Netherlands ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia
Czech Republic ▪ Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan
Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Colombia ▪ Australia



Intersurgical Ltd is certified to ISO 14001, ISO 9001 and ISO 13485

Пожалуйста, задумайтесь перед тем, как напечатать

Берегите электроэнергию и бумагу. Если вам нужно напечатать это письмо, пожалуйста, используйте двустороннюю печать.