


# Теплооблагодобменник Hydro-Trach™ Т

Теплооблагодобменник разработан для использования на трахеостомированных пациентах. Hydro-Trach Т является идеальным изделием для продолжительного использования у пациентов с самостоятельным (спонтанным) дыханием.


## Прозрачный корпус

Для удобства визуального осмотра на случай возможного наращивания секрети

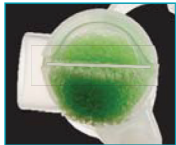

## Антиокклюзионный механизм

Обеспечивает санацию (аспирацию) трахеобронхиального дерева

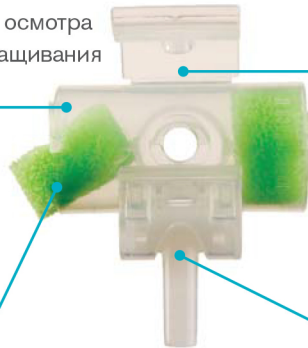

## Зажимной порт отсасывания

Позволяет облегчить отсасывание без извлечения устройства

## Небольшие размеры и малый вес

Уменьшает нагрузку на трахеостому

## Встроенный шарнирный кислородный соединитель

Обеспечивает подсоединение кислородной трубки без отдельного переходника; его можно легко повернуть в нужное положение

Код	1873000 (S*)	1874000 (S*)
Количество в коробке	25 (100*)	40 (30*)
Возврат влаги	26mg H <sub>2</sub> O/L	26mg H <sub>2</sub> O/L
Соппротивление при 30 л/мин	0.2cm H <sub>2</sub> O	0.2cm H <sub>2</sub> O
Соппротивление при 60 л/мин	0.7cm H <sub>2</sub> O	0.7cm H <sub>2</sub> O
Сжимаемый объем	19 мл	19 мл
Вес	8 г	8 г
Соединители	15F	15F
Минимальный дыхательный объем	50 мл	50 мл
Аксессуары		1.8 м кислородная трубка

## Средняя FiO<sub>2</sub> при переменных скоростях потока O<sub>2</sub>

Кислород (л/мин)	FiO <sub>2</sub> при 15 вдохах в минуту
1	26.5%
2	32.2%
3	35.0%
4	38.2%
5	41.8%
6	44.9%
7	47.9%
8	50.6%

**S** Имеется в наличии в стерильном виде

(S\*) Добавить S к семиразрядному номеру кода для стерильного варианта этого изделия, например: 5000000S (количество стерильных изделий в коробке указано в скобках).